

Foam In Place Seating (FIPS) con SunMate è stato sviluppato per venire incontro alle specifiche esigenze posturali dei pazienti disabili con gravi patologie.

Il FIPS è utilizzato in tutto il mondo da ortopedici professionisti e nei centri di riabilitazione per sostenere le deformità progressive e migliorare le funzioni del corpo attraverso un controllo posturale avanzato.

La linea delle schiume è stata scelta prestando molta attenzione alla qualità dei materiali utilizzati ed alle caratteristiche di adattabilità sul paziente allo scopo di garantire una postura su misura dinamica nel tempo.

La sicurezza e la facilità di utilizzo rendono il FIPS la soluzione migliore per realizzare sistemi di postura "speciali".



Fil FIPS è disponibile in tre differenti densità (Soft, Medium, Firm) per adeguarsi al diverso peso e livello di deformità, ed è confezionato in scatole composte da tre barattoli contenenti isocianato, poliolo e catalizzatore da miscelare.



L'utilizzo di poliuretani a celle aperte permette la realizzazione di sistemi di postura a bassa memoria ventilati ed il materiale tri-componenti garantisce l'elevata tenuta nel tempo.

Il FIPS viene fornito in boccioni pre-dosati e questo consente al tecnico ortopedico di ottenere due importanti vantaggi: minori sprechi grazie all'assenza di sfrido maggiore efficienza nella lavorazione.

La confezione contiene tutti gli attrezzi necessari ad eseguire il procedimento di miscelazione (vaschetta e sacchetti di plastica).

Per realizzare un sedile ed/o uno schienale sono necessari quattro passaggi:


- 1) Miscelare gli ingredienti; (seguendo le istruzioni)
- 2) Versarne una parte nel sacchetto di plastica in dotazione, già sistemato sul sedile o sullo schienale della carrozzina con all'interno un foglio pretagliato SunMate;
- 3) Posizionare il paziente sulla schiumata;
- 4) Fare aderire perfettamente e correttamente il paziente sullo schienale o sedile e lentamente il contenuto comincerà a lievitare andando ad avvolgere le anatomicità della persona.



Il FIPS permette di costruire il sistema direttamente sul paziente: a differenza di altri materiali che durante il processo sono soggetti a riscaldamento il FIPS non alterando la sua temperatura non rende necessario l'utilizzo di calchi in gesso (anche se può prevederli).

Fornito in confezioni pre-dosate, permettendo di operare direttamente sul paziente e non richiedendo la necessità di un calco in gesso, il FIPS è la maniera più rapida ed economica per realizzare un sistema di postura speciale.

Con la prima fornitura al cliente viene fornito un video esemplificativo che illustra in maniera dettagliata tutti i passaggi necessari alla realizzazione delle schiumate, per rendere le operazioni ancora più semplici.

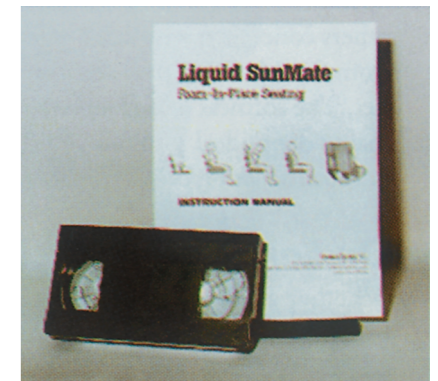

- Personalizzazione direttamente sul paziente
- Alte Prestazioni
- Perfetta Anatomicità
- Abbinabile al sistema modulare
- Possibilità di modifiche successive
- Realizzazione in tempi veloci

FOAM IN PLACE SEATING


Materiali Speciali per Unità Posturali con schiumata istantanea



Esempio di applicazione di inserto schiumato FIPS su unità posturale, modulare VERSA



La schiumata è stata realizzata ed è pronta per l'applicazione.

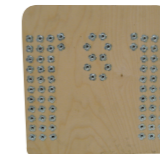

La base di legno a sostegno della schiumata viene realizzata per essere predisposta su qualsiasi modello di base.



L'inserto schiumata e la base vengono posizionati all'interno della fodera di rivestimento.



Per applicare lo schienale alla base (anche non ProMedicare) è possibile utilizzare due differenti sistemi di aggancio.



Lo schienale completo è pronto per l'installazione e per la consegna.

FIPS

DENSITA'	CONFEZIONI 1	
	dosaggio standard (1 unità)	dosaggio plus (1,5 unità)
Soft	1	x
Media	1	x
Rigida	1	x

MISURE STANDARD DELLE UNITA' MODULARI VERSA PREDISPOSTE PER L'INSERIMENTO DELL'INSERTO SCHIUMATO ISTANTANEO (disponibile il su misura a richiesta)

SEDUTE	<input type="checkbox"/> US	<input type="checkbox"/> XXS	<input type="checkbox"/> XS	<input type="checkbox"/> XS1	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> M1	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> XL
LARGHEZZA cm	30	36	36	39	42	42	45	48	48
Escursione	(da 20 a 30)	(da 26 a 36)	(da 26 a 36)	(da 29 a 39)	(da 32 a 42)	(da 32 a 42)	(da 35 a 45)	(da 38 a 48)	(da 38 a 48)
PROFONDITÀ cm	38	38	42	44	44	50	50	44	50
Escursione	(da 32 a 38)	(da 32 a 38)	(da 36 a 42)	(da 38 a 44)	(da 38 a 44)	(da 44 a 50)	(da 44 a 50)	(da 38 a 44)	(da 44 a 50)

SCHIENALI	<input type="checkbox"/> US	<input type="checkbox"/> XXS	<input type="checkbox"/> XS	<input type="checkbox"/> XS1	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> M1	<input type="checkbox"/> L
LARGHEZZA cm	30	36	36	39	42	42	45	48
Escursione	(da 20 a 30)	(da 26 a 36)	(da 26 a 36)	(da 29 a 39)	(da 32 a 42)	(da 32 a 42)	(da 35 a 45)	(da 38 a 48)
ALTEZZA cm	38	38	42	46	46	50	52	50
Escursione	(da 35 a 42)	(da 38 a 46)	(da 42 a 48)	(da 46 a 52)	(da 46 a 52)	(da 50 a 56)	(da 52 a 58)	(da 50 a 56)

FIPS Prodotto da:

Dynamic Systems, Inc
USA

Distribuito da:



Sede legale: Z.i. Lotto n° 41
72023 Mesagne (Br)
Tel: +39-0831-777840
Fax: +39-0831-730739
Sito web: www.promedicare.it
E-Mail: info@promedicare.it
C. Fisc. & P. Iva 01803920741

La soluzione migliore per offrire un efficace sistema di postura ai disabili con gravi patologie



Rivenditore Autorizzato: