

SUNMATE

Il Sun Mate è un materiale viscoelastico ed è particolarmente adatto nella realizzazione di sistemi di postura per disabili, ove vi sia necessità di sostenere e offrire comfort allo stesso tempo.



- Perfetta conformazione alle anatomicità della persona
- Struttura a celle aperte
- Ottimale ricircolo d'aria
- Assorbimento fino al 90% delle vibrazioni o shock da impatto

Scelta del corretto cuscino

La tabella accanto mostra un esempio di scelta del cuscino di Sun Mate adatto ad un determinato peso corporeo.

Se la persona in esame pesa 80 Kg e si presume che abbia bisogno di un cuscino di spessore 6 cm, il punto di incrocio delle linee (orizzontale e verticale) tracciate in corrispondenza dei due valori sugli assi (80 kg e 6,3 cm) identifica la densità del cuscino. Nell'esempio l'intersezione ricade nello spazio tra densità MEDIUM e FIRM;. Il cuscino da fornire a tale paziente dovrà essere, pertanto, di densità semi-rigid.

Il Sun Mate è disponibile in tre diverse densità da scegliere in funzione del peso corporeo del paziente per fornire una ottimale distribuzione delle pressioni.

Sun Mate SOFT


La formula soft offre un supporto basso alle aree sensibili alla pressione o alle lievi deformazioni. E' ideale per la realizzazione di sedili e schienali per individui di peso regolare. Un foglio di Sun Mate Soft può anche essere utilizzato come traversa per il materasso.

Sun Mate MEDIUM

La formula medium fornisce un supporto maggiore rispetto al soft ed è ideale per un vasto range di pesi corporei. Ad esempio cuscini dello spessore di 5-7-10 cm, possono sopportare, rispettivamente, pesi di 54, 90 e 135 Kg.

Sun Mate FIRM

La formula firm ha una natura termoplastica e per questo motivo viene utilizzato più frequentemente in climi umidi e caldi in modo da fornire un supporto che può essere paragonato a quello del Sun Mate medium in normali condizioni climatiche.

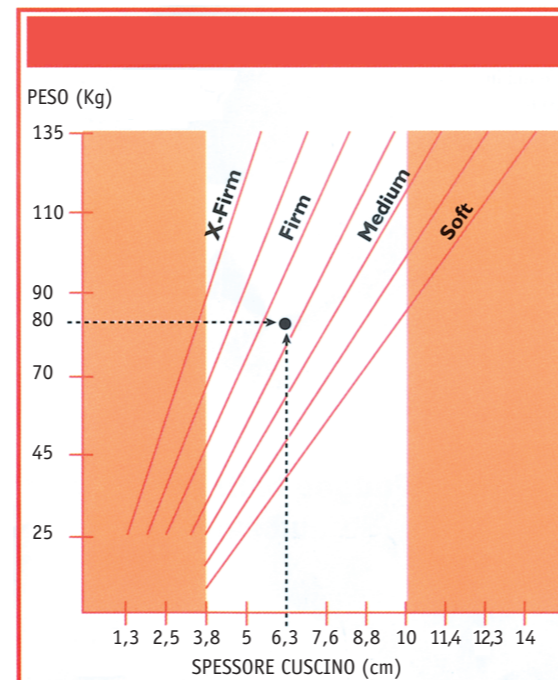

PUDGEE


Solo un tocco può descrivere la struttura unica e l'incredibile morbidezza del Pudgee.

Riduce la pressione e fornisce sollievo alla tensione della pelle e nel contempo allo stress fisico e mentale.

Un cuscino di Pudgee su un sedile d'auto fornisce comfort nei lunghi viaggi.




La caratteristica che lo rende così confortevole è la sua capacità di conformarsi alle anatomicità. Le cuciture degli abiti e le piegature vengono impresse nel cuscino e non sulla pelle.

Assorbe l'umidità e la tiene lontana dal corpo. La sua formula unica a base di piante gli permette anche di adeguarsi a qualsiasi condizione climatica: caldo o freddo, secco o umido.

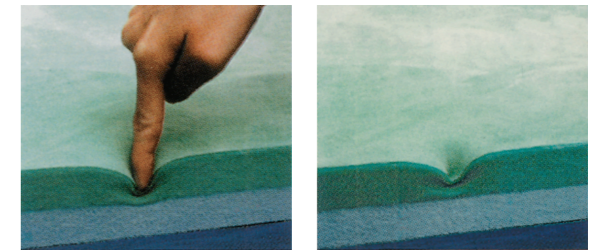



Si lava con acqua e sapone.

Se dotato di uno strato di impermeabilizzazione offre una buona protezione contro l'incontinenza e può anche essere sterilizzato con alcool, vapore o aria calda.

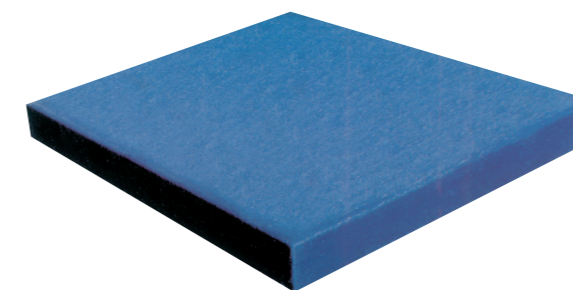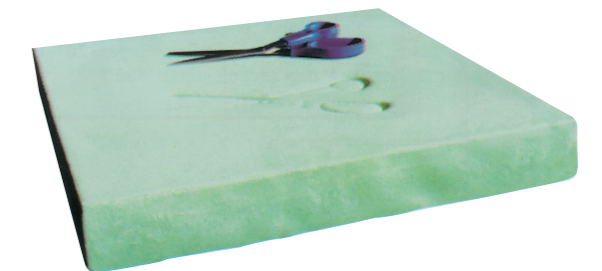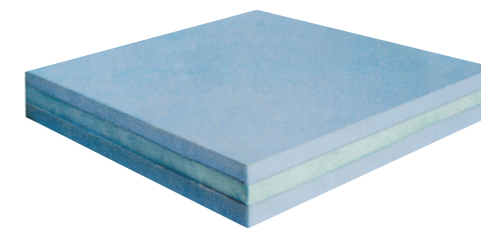

SUN MATE - PUDGEE

Materiali Speciali

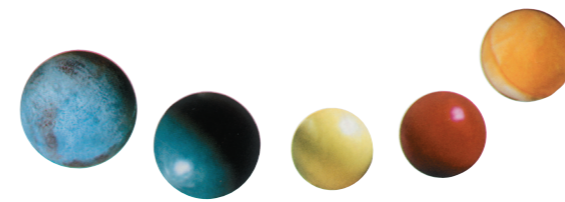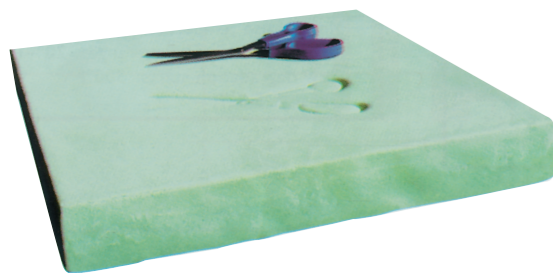

SFERE DI PUDGEE

PUDGEE e SunMate non sono impiegati non solo nelle sedute speciali per pazienti disabili. Grazie alla loro formula essi trovano un valido utilizzo anche in campo ingegneristico e/o riabilitativo.

Le sfere di PUDGEE, ad esempio, sono un ottimo ausilio per la riabilitazione della mano. Disponibili in tre densità (Soft-Medium-Firm) sono acquistabili in confezioni da sei pezzi.


PROGETTI SPECIALI

PUDGEE e SunMate hanno un elevato potere di assorbimento degli shock da impatto e dalle vibrazioni.

Possono essere utilizzati singolarmente o in combinazione in molteplici ambiti applicativi.

Ad esempio:

- Sedili per motociclette e biciclette
- Sedili propulsori degli aerei
- Imbottiture negli elicotteri
- Sedili per aerei militari e civili
- Sedili per auto da corsa
- Sedili per trattori
- Imbottiture per selle
- Bretellaggi per paracadutisti
- Sedili per barche
- Sedie per uffici
- Imbottiture ergonomiche per tastiere da computer
- Cuscini per ginocchiere
- Plantari

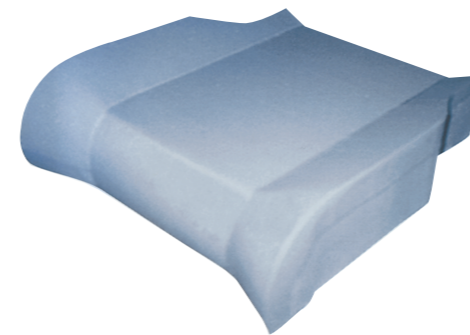

Sedile per barca



Sella per motocicletta

Prodotto da:

Dynamic Systems, Inc
USA

Distribuito da:



Sede legale: Z.i. Lotto n° 41
72023 Mesagne (Br)
Tel: +39-0831-777840
Fax: +39-0831-730739
Sito web: www.promedicare.it
E-Mail: info@promedicare.it
C. Fisc. & P. Iva 01803920741

Materiali di qualità per
sistemi di postura e realizzazioni
tecniche che garantiscono
sostegno ottimale e confort



Rivenditore Autorizzato: